

1 .Popis

Výrobok je bezkontaktný termometer s displejom, ktorý sa špecializuje na meranie teploty čela. v závislosti od rozdielov ľudskej pokožky sa teplota meria rozdielne; Meranie rôznych teplôt v rôznych častiach tela. Dôvodom je, že čím viac je ľudské telo odhalené, tým viac je ovplyvnená teplota okolia.

2. Používanie bezpečnostných príručiek

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Prevádzková teplota tohto produktu je 0 ° C až 40 ° C. Nepribližujte tento výrobok k živému predmetu, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Neumiestňujte tento výrobok príliš blízko k elektromagnetickému dosahu. (napr. rádio, mobilný telefón atď.). Nevystavujte tento produkt slnku alebo blízko kachlí. Nedotýkajte sa vody.

Tento produkt neovplyvňuje ani neupúšťajte, ak ho poškodíte, nepoužívajte ho.

Presnosť merania môže ovplyvniť pot na čele, vlasoch, klobúku alebo šatke.

Potenie na čele, môže ovplyvniť presnosť merania.

Teplotu môžete tiež merať z boku, na ušnom lalôčku.

Ak je potrebné vyčistiť, jemne utrite povrch prístroja alkoholom.

3.Preventívne opatrenia

Aby ste neovplyvnili výsledky merania, testujte pri izbovej teplote.

Testovacie podmienky:

- 1) Teplota skúšobného prostredia: 0°C-40°C (32-104°F)
- 2) Skladovacia teplota: -20°C-60 °C (-4-140°F)

4.Základné charakteristiky

- 1) Rozsah merania telesnej teploty: 34,8 - 42,4 ° C;
- 2) Rozsah merania povrchovej teploty: 0 - 100 ° C
- 3) Relatívna vlhkosť: 85%.
- 4) Reakčný čas cca 1s
- 5) Veľkosť prístroja: 152 (L) x 1025 (W) x 45 (H) mm
- 6) Presnosť: 32 - 36 ° C ± 0,2 ° C;

36-39 °C ± 0.1 °C;

39-43 °C ± 0.2 °C

5.Upozornenie o batérii

Vložte batérie správnym smerom do zariadenia !



Poznámka Tip: Vloženie batérií opačne, môže spôsobiť spálenie teplomeru a nepresné meranie


6.Meranie

Postup pri meraní:

- odstrániť vlasy s čela
- odstrániť pot s čela
- Meranie 5 - 10 cm od stredu čela




7. Základné komponenty štruktúry a tvaru

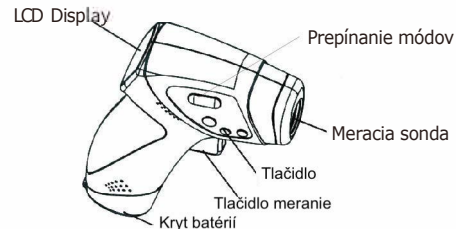

8. Popis ukazovateľa funkcie zobrazenia

- 1) Povrchová teplota
- 2) Teplota tela
- 3) Zobrazenie teploty
- 4) Symbol zvuku
- 5) Symbol batérie
- 6) Symbol vys. teplota
- 7) Teplota v 'C/'F

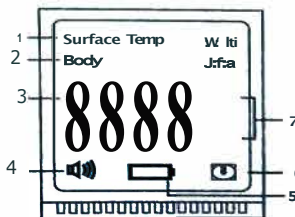

9.Nastavenie kľúčových funkcií

Stlačte tlačidlo Set na 3 sekundy, potom sa zobrazí:

- F11 vyber teploty stupňov Celzia a Fahrenheita; Vyberte "S'key to Celsius", zvolte "V" pre Fahrenheit, potvrdte tlačidlom Set.
- F2: Nastavenie teploty alarmu; Vyberte kláves „L:“ a kláves „V“ na zvýšenie alebo zníženie 0,1 ° C . Stlačením tlačidla Set potvrdte. (Predvolené nastavenie je 38 ° C)
- F3: nastavenie celkovej presnosti teploty; Vyberte kláves „L:“ a kláves „V“, aby ste zvýšili alebo znížili odchýlku 0,1 ° C stlačením tlačidla Set potvrdte. (Predvolené nastavenie je 0,0 C, neodporúča sa meniť)
- F4: bzučiak; Zvuky bzučiaka prepnete zvolením klávesu „S'key“ alebo klávesom „V“. Potvrdte stlačením tlačidla Set. (Predvolene je bzučiak zapnutý)
- F5: nastavenie jazyka; Vyberte kláves „L:“ a kláves „V“ a vyberte angličtinu a čínštinu. Potvrdte stlačením tlačidla Set.
- Ukončenie nastavovania funkcií.